

NAVODILA ZA UPORABO

SPREHAJALNA PALICA: MEHAK KORAK



CE

Medicinski pripomoček


POMEMBNO:

Uporabnik: Pred uporabo tega izdelka preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo. Če ne morete prebrati ali razumeti teh navodil, opozoril ali navodil, se obrnite na zdravstvenega delavca ali prodajalca, pred uporabo tega pripomočka, v nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe ali škode.

Pred uporabo katerega koli pripomočka za pomoč pri hoji se posvetujte s svojim zdravnikom ali zdravstvenim delavcem. On vam bo svetoval in vas obvestil o najprimernejšem načinu hoje, stopanja po stopnicah, vstajanja s stola ali posedanja na stol z uporabo sprehajalnih palic.

Prodajalec: Ta navodila morajo biti dana uporabniku izdelka.

1.SIMBOLI NA NALEPKI ALI V NAVODILIH ZA UPORABO

	Naslov proizvajalca	Max. 130	Omejitev teže
---	---------------------	-----------------	---------------

	Datum izdelave		Vabilo za ogled navodil za uporabo
	Serijska številka		Upoštevajte varnostna navodila
	Referenca ozdelka		CE skladnosti

2. NAMEN UPORABE


Te sprehajalna palica je pripomoček za pomoč pri hoji. Ta izdelek je namenjen posameznikom, ki tehtajo največ 100 kg z omejeno sposobnostjo hoje. Ne uporabljajte jih za noben drug namen kot za pomoč pri hoji. Ta izdelek se lahko uporablja tako v zaprtih prostorih kot na prostem.


Uporabniški priročnik mehak korak
Različica EN 02 – Maj 2021


-1/4-

3. NAVODILA ZA UPORABO

3.1 Nastavitev višine

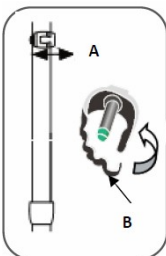


- Odprite varnostno zaponko na zapiralo za dimenzionalne nastavitve (slika B); potisnite zapiralo navzven ob uporabi obeh palcev. (slika A)
- Določite višino sprehajalne palice tako, da spodnjo cev po potrebi pomaknete v višjo cev ali iz nje.
- Ko najdete pravo višino, vstavite zapiralo: dve luknji zunanje in notranje cevi morata sovpadati.
- Zaprite varnostno zaponko-zapiralo za zaklepanje.
-  Preden se s polno težo naslonite na prilagojeno palico, poskrbite, da je zapiralo vstavljeno in pravilno zavarovano medtem, ko se z vašo težo postopoma postavite sprehajalno palico.

 Sprehajalno palico je treba prilagoditi glede na višino uporabnika. Pri merjenju dolžine palice mora uporabnik stati in biti v pravilnem položaju, konica palice je postavljena približno 15 cm stran od noge, roka pa upognjena približno pri 30 °. Slaba nastavitve lahko zmanjšajo zmogljivosti palic. V primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom ali zdravstvenim delavcem.

3.2 Prvi koraki s sprehajalno palico




- Za varno hojo, prosim držite palico, kot je navedeno v slikah na levi stran

 Pred vsako uporabo se vedno prepričajte:


- Da je naprava za zaklepanje-zapiralo pravilno vstavljeno in pritrjeno (zaprt zaklepni zatič).
- Baza/kapica mora biti v popolnem stanju. Če je obrabljena, je treba osnovo – bazo takoj zamenjati.
- Če se ugotovi, da je palica kakor koli poškodovana, NE uporabljajte izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe. Posvetujte se s svojim zdravstvenim delavcem.

4. NAVODILA ZA UPORABO

 Neupoštevanje previdnostnih navodil za uporabo lahko povzroči resne poškodbe.

- Pri uporabi:
 - Trdno držite ročaj.
 - Sprehajalno palico držite čim bolj navpično.
 - Sprehajalne palice so zasnovane tako, da podpira uporabnikovo težo in jo je vedno treba uporabljati s kratkim podaljševanjem korakov.
- Največja statična teža na sprehajalno palico lahko znaša 100 kg; uporabnik ne sme nikoli tehtati več.
- **Bodite posebej pozorni pri uporabi sprehajalne palice na odejah, mokrih, sneženih ali morebiti spolzkih površinah (listi, pesek in gramoz). Ne uporabljajte jih na ledenih površinah.**
- **Bodite pozorni na morebitni utor ali depresijo na cesti ker se palica lahko zatakne.**
- Med uporabo stopnišča uporabite ograjo stopnišča z prosto roko. Močno priporočamo pomoč tretje osebe.
- V primeru padca, spustite palico v stran in je ne držite.
- Na sprehajalno palico nikoli ne obešajte vrečke ali drugega predmeta.
- Zapiralo ni zasnovano tako, da bi se večkrat odpiralo in zapiralo po nepotrebem. To lahko oslabi gumb zapirala in ga zato poškoduje.
- Nikoli ne spreminjajte sprehajalnih palic, saj so bile zasnovane tako, da zagotavljajo varnost. Iz istih razlogov uporabite samo nadomestne dele proizvajalca.
- Sprehajalne palice so namenjene izključno za uporabo pri hoji. Nikoli jih ne uporabljajte za druge namene kot so vleka ali vzvod.

5. NEGA IN VZDRŽEVANJE

-  Pomanjkanje nege in vzdrževanje vaše sprehajalne palice MEHAK KORAK lahko povzroči resne poškodbe.
- Priporoča se redno čiščenje sprehajalne palice, posebej oprijema (ročaja) ali baza (kapice), je treba očistiti s čisto vodo. Vse površine obrišite z vlažno mehko krpo in pustite, da se vse površine pred uporabo posušijo. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, izdelkov za čiščenje, kemičnih izdelkov, mastnih izdelkov, ki bi sprehajalno palico naredilo spolzko ali kateri koli izdelek, ki vsebuje belilo.
 - Vsi deli sprehajalne palice morajo biti redno pod nadzorom; za vašo varnost priporočamo, da jo vsakih 6 mesecev kontrolira zdravstveni delavec. Redni pregled delov, vključno z mehanizmi, nosilci in plastiko za deformacijo, korozijo, zlom, obrabo ali kompresijo.
 - Nadzorovati je treba stanje obrabljenosti ali razpoke naslednjih delov: baze (kapice), oprijema, zapirala. Pomembno je, da redno preverjate stanje baze sprehajalne palice: odvisno od površine, na kateri se uporablja sprehajalna palica, bodo baze bolj ali manj hitro obrabljene.
 - Za zagotovitev varnosti in neprekinjene uporabe je treba obrabljene ali zlomljene dele takoj zamenjati. Uporabljajte izključno nadomestne dele proizvajalca. Nadomestne dele lahko dobite pri vašem farmacevtu ali trgovcu.

Uporabniški priročnik mehak korak
Različica EN 02 – Maj 2021

-2/4-


- Tega izdelka ne smete spreminjati, razen če zamenjate obrabljene dele.
- V primeru neuporabe za daljše obdobje priporočamo ponovno kontrolo s strani zdravstvenega delavca pred kakršno koli ponovno uporabo.



Vaš strokovnjak je edini, ki je pooblaščen za vzdrževanje vaših bergel.



6. ZAMENJAVA OBRABLJENIH DELOV

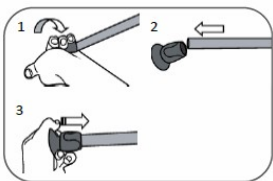6.1 Zamenjava podstavka - baze/ kapice




- Odstranite staro bazo: trdno držite sprehajalno palico v eni roki, in odstranite bazo z drugo roko z obračanjem baze z bergle (1 in 2).
- Z roko potisnite novo bazo na sprehajalno palico (3).
-  Postavite sprehajalno palico na tla in postopoma prenesite svojo polno težo na sprehajalno palico, dokler sprehajalna palica ne doseže dna baze.
-  Pred uporabo sprehajalne palice, se prepričajte, da je baza pravilno vstavljena.

6.2 Zamenjava zapirala za nastavitev dimenzij




- Za podroben postopek preberite poglavje "Uporabniški priročnik poglavje 3 / nastavitev višine"

7. POSOJA

 Sprehajalna palica je osebni predmet in je posebej prilagojen posamezniku. Da se izognete tveganju poškodb, sprehajalne palice ne smete deliti.

8. SKLADIŠČENEJE

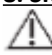 Neizpolnjevanje pogojev skladiščenja lahko privede do poškodb sprehajalne palice in s tem do tveganj za poškodbe uporabnika.


- Izdelek ne shranjujte izpostavljene neposrednim virom vročine (npr. za oknom ali blizu radiatorja) ali na hladnih mestih.
- Če je oprijem izpostavljen ekstremnim temperaturam (nad 37 ° C ali pod 0 ° C), imajo veliko vlažnost in / ali postanejo mokre, pred uporabo zagotovite, da se oprijem ne vrtil na ročici ročaja, sicer se lahko poškodujejo ali povzročijo poškodbo. Pred uporabo zagotovite, da je vsa oprema varno pritrjena in vlažni deli osušeni.
- Če je izpostavljen ekstremnim temperaturam nad 41 ° C, bo sprehajalna palica vroča in lahko pride do opeklin prve stopnje. Pred uporabo jo pustite, da se ohladi.
- Hranite ločeno od virov vžiga in plamena.
- Upoštevajte pogoje shranjevanja sprehajalnih palic kot sledi:
- Hranite na suhem mestu med 5 ° C in 41 ° C.
- Relativna vlažnost zraka mora biti med 30% in 70%.
- Zaščitite svojo sprehajalno palico proti prahu, koroziji (pred abrazivnimi elementi, peskom, morsko vodo, solnim zrakom) ali mastnim okoljem tako, da jih zapakirate.

9. ODSTRANITEV

Naše sprehajalne palice so izdelane iz aluminijastih cevi in plastičnih delov: ti materiali so inertni, nestrupeni in ne biološko razgradljivi. Za odstranjevanje teh izdelkov veljajo lokalni predpisi za gospodinjne odpadke zato jih spoštujte. Bodite okolju prijazni in reciklirajte ta izdelek v vašem obratu za recikliranje ob koncu njegove življenjske dobe.

10. TEHNIČNI PODATKI

Prepričajte se, da je nalepka na sprehajalni palici vedno čitljiva. Po potrebi jo zamenjajte pri svojem prodajalcu.

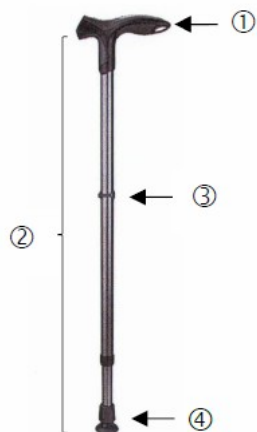

1	Oprijem
2	Višina do oprijema
3	Zapiralo
4	Baza/kapica

Uporabniški priročnik mehak korak
Različica EN 02 – Maj 2021

-3/4-

MODEL	MEHAK KORAK
Višina do oprijema (min.-max.)	780-1070 mm
Nastavitev višine podpore	14 položajev v razmaku 25 mm
Teža sprehajalne palice	360g
Maksimalna teža uporabnika	Max. 100kg
NADOMESTNI DELI	
Zapiralo	
Baza/kapica	
DODATKI	
TRIPOD	
Zapestni trak	

11. PRIČAKOVANA ŽIVLJENSKA DOBA

Pričakovana življenjska doba sprehajalne palice je odvisna od pogojev uporabe in skladiščenja, pa tudi od redne nege in vzdrževanja. Vaša sprehajalna palica ostane v popolnem stanju 24 mesecev, če boste nujno sledili informacijam podanimi v tem uporabniškem priročniku.

12. GARANCIJA

Ta izdelek ima 24-mesečno garancijo od datuma nakupa uporabnika proti proizvodnim latentnim napakam. Prosimo, da obdržite dokazilo o nakupu. Ta garancija ne pokriva normalne obrabe sprehajalne palice, še posebej delov, izpostavljenih obrabi (podstavki-baze, zapirala, zamenljivi oprijemi), posledic neprimerne ali nepravilne uporabe, škodljivo ali slabo vzdrževanja zaradi neupoštevanja uporabniškega priročnika.

13. OBVESTILO O RESNIH POŠKODBAH

Vsako resno poškodbo, povezano z medicinskim pripomočkom, morate obvestiti tako nas kot tudi pristojni organ v vaši državi.



FDI France Médical

77 Route de Buatière, Fitialieu

38490 Les Abrets en Dauphiné- France



Ti izdelki spadajo med medicinske pripomočke razreda I v skladu z uredbo EU 2017/745 in so popolnoma v skladu z evropsko in ISO normo 11334-1.

Uporabniški priročnik mehak korak
Različica EN 02 – Maj 2021