



S5-P1-I1-F2-A4

FICHE TECHNIQUE DISPOSITIF MEDICAL N° 67 – Sangles claviculaires

Dept : Affaires Réglementaires

Indice : E

15/01/2023

Photos :



Mode d'action :

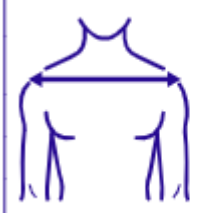
Deux sangles dorsales croisées fixées sur un ancrage rembourré.

Le serrage simultané des sangles permet de stabiliser les clavicules.

Sangles ajustables par découpe en fonction de la taille du patient.

Population cible :

Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

	T0		T1	
	(a) Largeur d'épaules	(b) Repères visuels	(a) Largeur d'épaules	(b) Repères visuels
	20 - 24 cm	1	34 - 40 cm	1
	25 - 29 cm	2	41 - 50 cm	2
	30 - 34 cm	3	> 50 cm	3

Principaux composants :

Coton – Polyester – Elasthanne – Polyamide – Polyoxyméthylène – Ethylène acétate de vinyle - Polyuréthane

- **Présence de latex naturel :** Oui Non
- **Présence de phtalates (DHP) :** Oui Non
- **Présence de substance d'origine animale ou de sang, de plasma, de cellules ou de tissus d'origine humaine :** Oui Non
- **Présence de substance médicamenteuse :** Oui Non

3. IDENTIFICATION ET CODIFICATION

Références article :